



Intraoperatives Neuromonitoring
Funktionelle Neurochirurgie
Schmerztherapie
Neurologische Diagnostik

inomed 
connected




KIS-Anbindung

Austausch von Patientendaten und IOM Dokumentation zwischen dem IOM Gerät und dem Krankenhausinformationssystem (KIS)

HL7 (ISIS: 508 525 oder 508 521* / C2: 508 524 oder 508 521*)

- » Abfrage von Patienteninformationen aus dem KIS mit der Patienten-ID
- » Speichern der erstellten PDF-Berichte aus den IOM Systemen in Ihrem KIS
- » Unterstützung von Standard-HL7-Nachrichtentypen

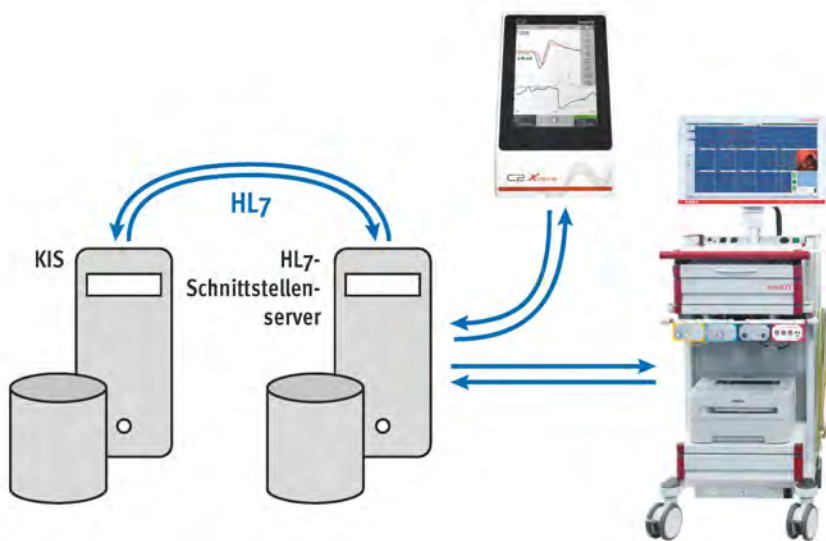

Verfügbar für:



Lizenzierung: pro System

Voraussetzungen: Netzwerkverbindung, auf klinischem Server oder direkt auf dem IOM System installierter HL7-Schnittstellenserver

* Kann eine Kooperation mit Dritten erfordern

GDT (ISIS: 504 419 / C2: 508 520)

- » Abfrage von Patienteninformationen aus dem KIS mit der Patienten-ID
- » Speichern der erstellten PDF-Berichte aus den IOM Systemen in Ihrem KIS



Verfügbar für:



Lizenzierung: auf Systemanzahl basierend

Voraussetzungen: Netzwerkverbindung, KIS mit GDT-Unterstützung

Remote Monitoring

Teilen des IOM Bildschirms mit einem Mobilgerät oder einem Krankenhausarbeitsplatz

inoView – WLAN-Set mit Software (508 517)

- » Hinzufügen von Kommentaren direkt auf einem Tablet
- » Anzeigen des Systembildschirms über das Netzwerk im OP und überall im Krankenhaus, wo WLAN verfügbar ist
- » inoView App für Android und iOS kostenlos verfügbar



Verfügbar für:




Lizensierung: pro System

Voraussetzungen: drahtlose Netzwerkverbindung, iPad: iOS-Version 12.1, Android-basierte Tablets: Android-Version 8.0

Netop (504 205)

- » Anzeigen des Systembildschirms über das Netzwerk überall im Krankenhaus
- » Als Windows-Anwendung verfügbar

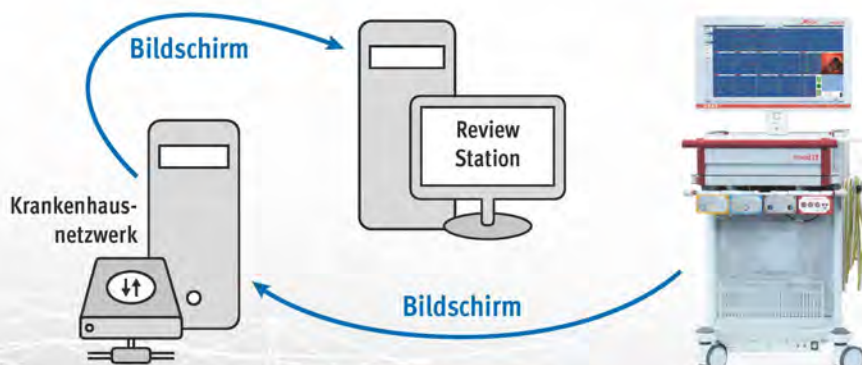

Verfügbar für:



Lizensierung: pro Review Station

Voraussetzungen: Netzwerkverbindung

Dokumentation

Teilen, Archivieren und Drucken von Berichten

Speichern auf Netzwerkfreigabe (ISIS: 508 523 / C2: 508 522)

- » Speichern der erstellten PDF-Berichte im Krankenhausnetzwerk und deren KIS-Integration in die Patientenakten ermöglichen



Verfügbar für:



Lizensierung: pro System

Voraussetzungen: Netzwerkverbindung, NeuroExplorer 2019 Version 7.0.4 oder neuer (in Bezug auf die ISIS Familie)

* KIS-Integration erfolgt durch klinisches IT-Personal

Drucken von Berichten auf Netzwerkdruckern (in Standardkonfiguration enthalten)

- » Drucken der erstellten Berichte auf Druckern im gesamten Krankenhausnetzwerk
- » Unterstützung von PostScript-Druckern



Verfügbar für:



Voraussetzungen: Netzwerkverbindung, kompatible Druckertreibersoftware

Datenmanagement

Synchronisieren von Patienten- und Messdaten zwischen mehreren ISIS IOM Systemen und Prüfstationen über das Krankenhausnetzwerk

ISIS Software DataSync (504 400)


- » Hochladen von Patienten- und Messdaten auf den Server
- » Herunterladen von Daten auf Ihre Review Station
- » Organisieren und Bearbeiten der Daten, z. B. Hinzufügen von Kommentaren und Bearbeiten von Peaks
- » Hochladen der Änderungen auf den Server, um sie für jeden zugänglich zu machen
- » Anzeigen des Synchronisationsstatus der Daten

Verfügbar für:



Lizenzierung: pro System

Voraussetzungen: Netzwerkverbindung, ISIS Software DataSync, dieselbe NeuroExplorer-Version auf allen Systemen, Microsoft SQL Server

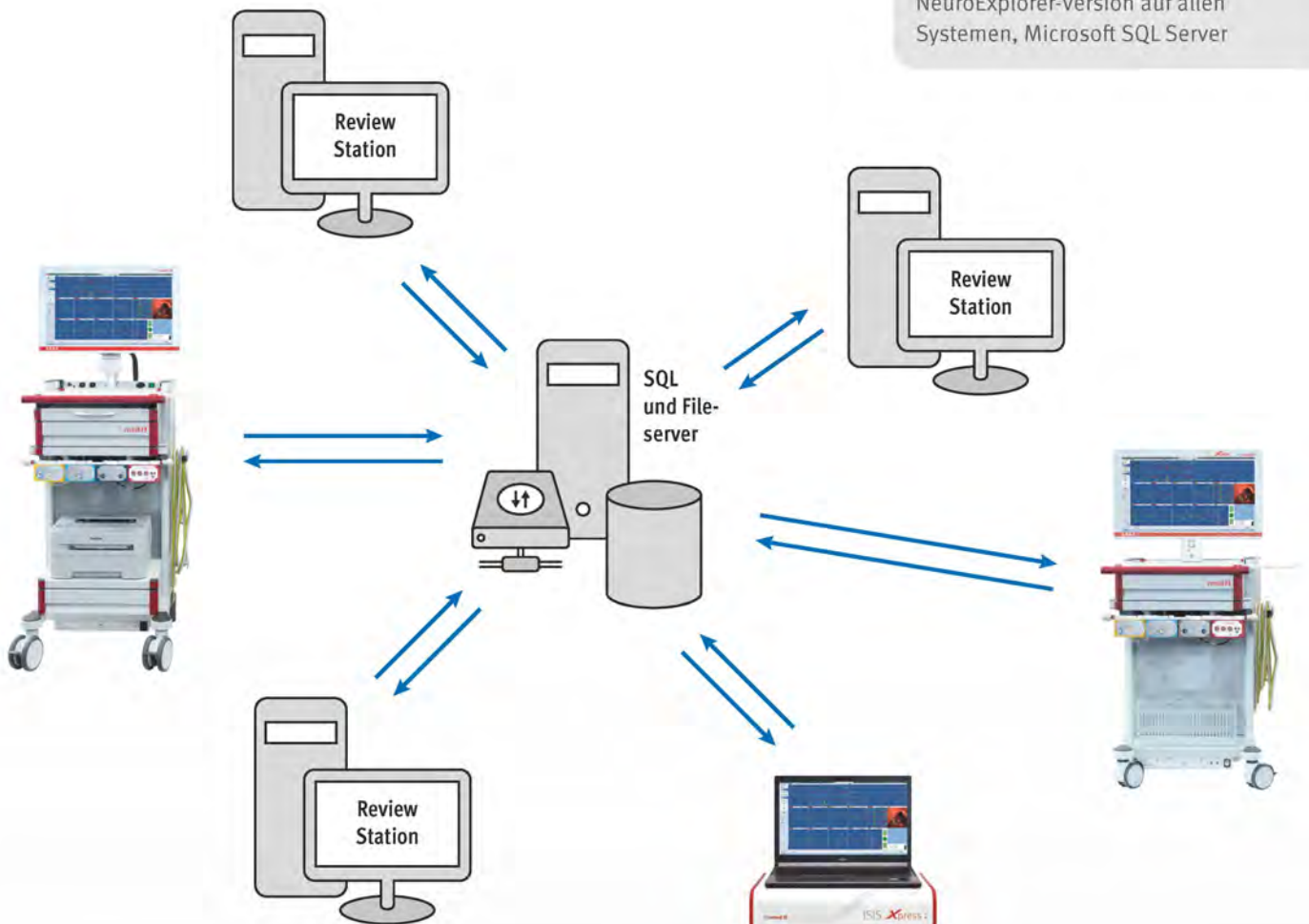


Dokumentation

Teilen und Archivieren von Patienten- und Messdaten

Export von Patientendaten auf ein Netzlaufwerk (in Standardkonfiguration enthalten)

- » Export von Patienten- und Messdaten auf ein Netzlaufwerk zur einfachen Archivierung und zum Import von anderen Review Stations mit installiertem NeuroExplorer

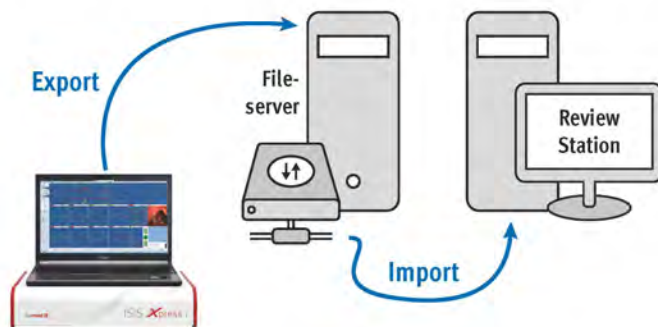

Verfügbar für:



Voraussetzungen: Netzwerkverbindung, gemeinsames Netzwerkverzeichnis



C2 Xplore WLAN-Set (508 566)

- » Alle für den C2 Xplore dargestellten Netzwerkverbindungen sind auch über WLAN verfügbar



- » Partnerschaft
- » Präzision
- » Innovation



Intraoperatives Neuromonitoring
Funktionelle Neurochirurgie
Schmerztherapie
Neurologische Diagnostik

inomed 

inomed Medizintechnik GmbH
Im Hausgrün 29
79312 Emmendingen (GERMANY)

Tel. +49 7641 9414-0
Fax +49 7641 9414-94
info@inomed.com
www.inomed.com